

直连 (DC) 雾化器

Glass Expansion 的 DC (直连) 雾化器配备了 UniFit 样品连接器, 可轻松套接在进样臂上, 并具有专为 ICP 直接连接设计的氩气连接器。

DC 雾化器的优点:

- 惰性无金属氩气连接器
- 特定仪器型号的直连氩气软管
- 可靠的棘轮式接头, 确保氩气无泄漏连接

DC 雾化器与 U 系列雾化器具有以下共同优点:

抗堵塞

样品通道从入口到喷口保持一致, 无颗粒物滞留空间

快速清洗

由于没有样品滞留位置, 实现最快的清洗速度和最高的样品通量

使用简单

专利 UniFit 接头可轻松滑入进样臂并形成优良密封

全长 VitriCone™ 结构

VitriCone™ 设计采用高精度加工的厚壁玻璃毛细管构成样品通道



适用于 Agilent® 5000 系列的 SeaSpray DC 雾化器
GE 零件号: [A13-07-USS2](#)

DC 版本的 SeaSpray、MicroMist、Conikal、Slurry、DuraMist、OpalMist 和 VeeSpray 雾化器可用于主流 ICP-OES 和 ICP-MS 仪器。

DC 雾化器的零件号具有与气体连接类型相关的前缀。例如, 前缀 “A13-” 表示适用于 Agilent® 5000 系列 ICP-OES 的连接器, 因此零件号 [A13-07-USS2](#) 是为该型号配置的 SeaSpray 雾化器。



GLASS EXPANSION
Quality By Design

Asia Pacific

6 Central Boulevard
Port Melbourne VIC 3207
Australia
+61 3 9320 1111
enquiries@geicp.com

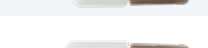
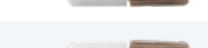
Americas

31 Jonathan Bourne Drive
Unit 7, Pocasset, MA 02559
USA
508 563 1800
geusa@geicp.com

Europe

Friedenbachstrasse 9
35781 Weilburg
Germany
+49 6471 3778517
gegmbh@geicp.com

请参阅下表, 查看直连雾化器系列的完整前缀列表:

Manufacturer	Model	P/N Prefix	Gas Line Included	
Agilent Technologies®	4100/4200	MP11-	70-803-0969	
Agilent Technologies®	Vista/700-ES Series	A11-	70-803-0969	
Agilent Technologies®	7700/7800/7900/8800/8900	A13-	70-803-1105	
Agilent Technologies®	5100/5110/5800/5900	A13-	70-803-1105	
Analytik Jena®	ICP-MS	A61-	70-803-2002	
Analytik Jena®	ICP-OES	A13-	70-803-1105	
Horiba® Jobin Yvon	All Models	A13-	70-803-1105	
Leeman	All Models	A11-	70-803-0969	
Nu Instruments	ICP-MS	A51-	70-803-1858	
Nu Instruments	TOF-ICP-MS	A52-	70-803-2044	
PerkinElmer®	ICP-OES	A21-	70-803-1070	
PerkinElmer®	Elan/NexION 300/350	A22-	70-803-1049	
PerkinElmer®	NexION 1000, 1100, 2000, 2200, 5000	A23-	70-803-1449	
Radom	MICAP – OES™ 1000	A70-	70-803-2054	
Shimadzu®	All Models	A41-	70-803-1311	
Spectro™	All Models	A21-	70-803-1070	
Standard BioTools™	Helios	A21-	70-803-1070	
Thermo Fisher Scientific®	PRO, 6000/7000, Q/RQ/TQ, X-Series & Neoma	A31-	70-803-1105	
Thermo Fisher Scientific®	MX Series	A13-	70-803-1105	
Thermo Fisher Scientific®	Neptune	A11-	70-803-0969	

更多关于 GE 雾化器的信息, 请访问: www.geicp.com